

**MEBER<sup>+</sup>**

EXTRA LITE  
**ZÈNA**

Sedia portantina ultra-compatta ad alta tecnologia  
High-technology ultra compact sedan chair

INSUPERABILE  
NEGLI **SPAZI**  
**RISTRETTI**

UNBEATABLE  
IN **NARROW**  
**SPACES**



[www.meber.it](http://www.meber.it)

# ZENA. VAI OLTRE I LIMITI DELLO SPAZIO ZENA. GO BEYOND THE LIMITS OF SPACE

Peso | Weight

**13 Kg**

**< 47cm\* >**

**29  
cm**

Leve estensibili  
Extensible Levers



Queste foto non professionali sono state scattate dagli operatori che hanno collaborato con noi nella fase di test e affinamento del prodotto. Mostrano chiaramente come Zena si adatti alla perfezione alle situazioni più difficili lasciando gli operatori liberi di operare nel massimo della flessibilità e della sicurezza.

These non-professional photos were taken by the operators who collaborated with us in the product testing and refinement phase. They clearly show how Zena adapts perfectly to the most difficult situations, leaving operators free to operate with maximum flexibility and safety.



## PERCHÉ ZENA È DIVERSA DA OGNI ALTRA SEDIA.

Zena è incredibilmente compatta e leggera, ma non toglie nulla alla sicurezza di operatori e pazienti. La particolare progettazione è pensata per consentire la massima manovrabilità in spazi angusti, come ad esempio le scale di vecchie abitazioni o scale a chiocciola. Oltre a ciò è stato eseguito un attento studio ergonomico in modo da sottoporre gli operatori a carichi prevalentemente sull'asse verticale, ovvero col minimo ricorso alla sola forza muscolare di sollevamento.

Zena is incredibly compact and light, but does not detract from the safety of operators and patients. The particular design is made to allow maximum maneuverability in tight spaces, such as the stairs of old houses or spiral staircases. In addition, a careful ergonomic study was performed in order to subject the operators to loads mainly on the vertical axis, against the minimum use of lifting muscle force alone.

## WHY ZENA IS DIFFERENT FROM ANY OTHER CHAIR.

- Pensata per gli spazi ridotti, ideale in ogni contesto
- Designed for small spaces, ideal in any context



## TECNOLOGIA SPAZIALE...PER QUANDO MANCA LO SPAZIO! SPACE TECHNOLOGY... FOR WHEN THERE IS NO SPACE!




Edifici datati  
Aged buildings



Treni e pullman  
Trains and coaches



Aerei  
Aircrafts

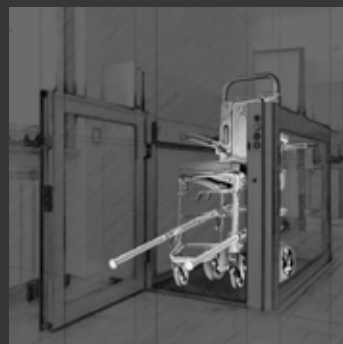

Montacarichi  
Lifts

\* La larghezza minima di Zena è di 47,5cm, aprendo completamente le leve posteriori la larghezza massima è di 50cm  
The minimum width of Zena is 47,5cm, by fully opening the rear levers the maximum width is 50cm



# ALTA TECNOLOGIA, ULTRA COMPATTA

## ULTRA COMPACT, HIGH TECHNOLOGY

### LEVE | LEVERS

Innovative leve con apertura orizzontale per consentire nuovi schemi operativi con soli due operatori.

Innovative levers with horizontal opening to allow new operating schemes with only two operators.

### HI COMFORT AREA



Uno speciale materiale garantisce comfort e stabilità al paziente.

A special material ensures patient comfort and stability.

### RUOTE DA 200mm | 200mm WHEELS

Ruote posteriori di elevate dimensioni per il massimo comfort e freno sulle anteriori, ideale quando si trasporta la sedia chiusa in ascensore.

Large rear wheels for maximum comfort and brake on the front, ideal when transporting the chair closed in the lift.





## LEGA LEGGERA D'ALLUMINIO

Extra Lite Zena in leghe speciali alluminio di derivazione aeronautica per minimizzare il peso e facilitare il trasporto.

## LIGHT ALUMINIUM ALLOY

Extra Lite Zena is made with special aluminum alloys aeroderivative to minimize the weight and facilitates the transport.

## MASSIMA FLESSIBILITÀ MAXIMUM FLEXIBILITY

Leve estensibili anteriori con innovativo sistema a rotazione.

Extendable front levers with innovative rotation system.



Maniglie ad alto grip  
High grip handles

Pag. 8



PORTATA  
LOAD CAPACITY

**230 kg**

## COMPATTA, INCREDIBILMENTE COMPATTA **COMPACT, INCREDIBLY COMPACT**



Comparazione degli ingombri con una normale sedia portantina

Shape comparison with a standard sedan chair

L'accessibilità delle scale è da sempre un grande problema nel prelevamento e la ricollocazione di un paziente presso la sua abitazione. Le moderne sedie sali/scendiscale, eventualmente nelle versioni motorizzate, sono un aiuto insostituibile, ma spesso non possono essere utilizzate per il più banale dei motivi: non c'è abbastanza spazio per muoversi. Che fare allora? Chiedete aiuto a Zena: la nuova sedia portantina scendiscala che incorpora la più avanzata tecnologia costruttiva, i migliori materiali e un design studiato fianco a fianco degli operatori.

The accessibility of the stairs has always been a big problem in picking up and relocating a patient to his home. The modern up / down chairs, possibly in the motorized versions, are an irreplaceable aid, but often they cannot be used for the most banal reason: there is not enough space to move. So what to do? Ask Zena for help: the new ladder chair that incorporates the most advanced construction technology, the best materials and a design studied side by side with the operators.

# SEMPLICE E SICURA DA UTILIZZARE

## EASY AND SAFE TO USE



### ● LEVE POSTERIORI DI NUOVA CONCEZIONE AD INTERASSE MAGGIORATO

La distanza delle leve è superiore alle normali sedie portantine e ciò evita, anche a soccorritori corpulenti, di protendere all'indietro le braccia. Inoltre la forma sagomata delle leve consente di affrontare con più flessibilità gli spazi stretti, in particolare nei punti di svolta sui pianerottoli.

● Ruote ideali per comfort e sicurezza


● Ideal wheels for comfort and safety

### ● NEWLY DESIGNED REAR LEVERS WITH INCREASED DISTANCE


The distance of the levers is greater than normal sedan chairs and this avoids, even to burly rescuers, from reaching backwards the arms. In addition, the bent shape of the levers allows to deal with narrow spaces with more flexibility, in particular at the turning points on the landings.



La distanza tra l'operatore e la sedia è minima e ciò consente una presa ottimale in ogni direzione.

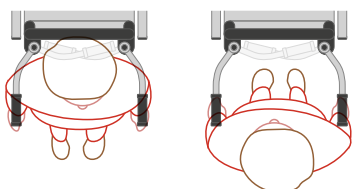

The distance between the operator and the chair is minimal and this allows an optimal grip in every direction.

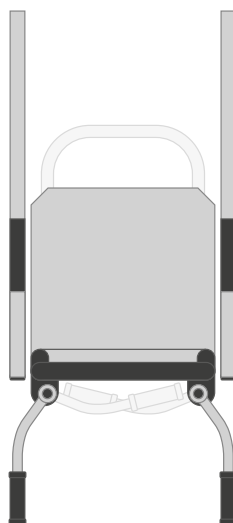

**La particolare forma e il posizionamento delle leve posteriori sono una reale rivoluzione!** L'operatore può così posizionarsi col corpo molto vicino al paziente, ma può contare su una lunghezza tale da decidere se operare in fronte marcia o di spalle. In questo modo è l'operatore che sceglie il modo di lavorare più adatto alle imprevedibili situazioni che avrà davanti.

**The particular shape and positioning of the rear levers are a real revolution!** The operator can thus position himself with the body very close to the patient, but can count on a length such as to decide whether to operate in front of the gear or from the shoulders. In this way, it is the operator who chooses the most suitable way of working for the unpredictable situations ahead.

**Leggera e pratica**

Light and practical

**Ideale nelle case  
del centro storico**

Ideal in the houses of  
the historic center

**Infiniti campi d'impiego**

Endless fields of use

EXTRA LITE  
**ZENA**



## COMFORT

- Zena è talmente compatta che può essere alloggiata nel bagagliaio di un'utilitaria

- Zena is so compact that it can be housed in the trunk of an economy car




Schienale e seduta rivestiti con  
materiale ad alto comfort SoftContact

Back and seat covered with high  
comfort SoftContact material


Braccioli rivestiti abbassabili  
Lowered armrests

### Alla prova su scale impossibili

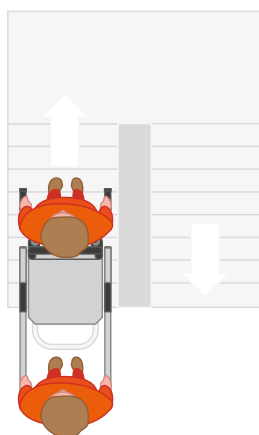

Salita e discesa anche  
in spazi angusti


Ascent and descent  
even in tight spaces

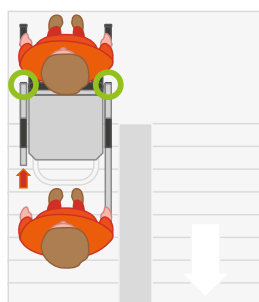

Leve estraibili e leve posteriori  
per adattarsi ad ogni situazione


Removable levers and rear  
levers to adapt to any situation

### To the test on impossible stairs

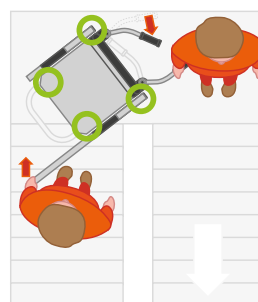

Spazi di manovra ridotti al  
minimo in tutta sicurezza

Maneuvering spaces  
minimized in complete safety

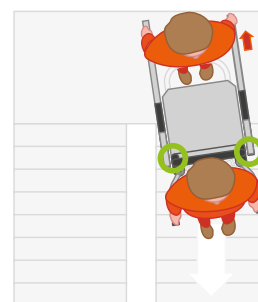

Massima sicurezza per  
operatori e pazienti

Maximum safety for operators  
and patients



## Caratteristiche tecniche | Technical data

EXTRA LITE  
**ZENA**

Art. **679**

**Materiale**  
Material Leghe di alluminio  
Aluminium alloy

**Lunghezza**  
Length Min 65 cm  
Max 122 cm

**Larghezza**  
Width 47/50 cm

**Spessore ripiegata**  
Folded height 29 cm

**Altezza**  
Height 102 cm

**Peso**  
Weight 13 kg

**Portata**  
Load capacity 230 kg



## Fornita di serie con | Supplied with

Article Code

**566**

Busta nera con 3 cinture a 2  
pz. Fondo nero e MeBer arancio per  
Extra Lite Zena

Black bag with 3 belts in 2 pieces made of  
black ribbon with orange "MeBer" logo for  
Extra Lite Zena.



## Accessori | Accessories

Article Code

**Art. 171J** (sinistra/left)

Leve estraibili con impugnatura  
ergonomica per sedie Extra

Article Code

**Art. 172J** (destra/right)

Extractable levers with ergonomic  
handle for Extra chairs



Article Code  
**Art. 171J**



Article Code  
**Art. 172J**

Article Code

**Art. 612/AN-2/MEB**

Article Code

**Art. 612/N-2/MEB**



Cintura toracica regolabile nera o nera  
e arancio con aggancio a 4 punti e  
nastro MeBer per barelle autocaricanti  
e sedie



Black or orange and black adjustable  
thoracic abdominal belt with 4 points  
fastening and MeBer ribbon for self-  
loading stretchers and sedan chairs



Article Code

**960**

EXTRA FIXING SYSTEM  
Sistema certificato di fissaggio per sedia Extra

EXTRA FIXING SYSTEM  
Fixing system for chair Extra UNI EN 1789 certified

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

All rights are reserved. Any variations on images and subjects can be done without notice. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale is not to be considered responsible for damages caused by lack or wrong information here mentioned. Product images are only for advertising purposes.

**Me.Ber. s.r.l. Unipersonale**

Strada Langhirano, 270

43124 Fontanini (Parma) Italy

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780

| e-mail: info@meber.it