

Me.Ber. s.r.l.

Via Langhirano, 270 - 43124 Fontanini (Parma) Italy

Tel. 0521 648770 - Fax 0521 648780

e-mail: contact@meber.it - www.merber.it

Organo di informazione aziendale realizzato da Me.Ber. srl.
Per informazioni contattare contact@meber.it o accedere
al sito www.merber.it



MEBER

www.merber.it

Medical Journal



Settembre 2011

Numero

21

SPECIALE TRAUMA PRESERVARE LA SICUREZZA DEL PAZIENTE E FACILITARE IL RECUPERO

OPERATIVI ED EFFICACI NELLE SITUAZIONI PIÙ DIFFICILI

Ergon, la barella a geometria variabile, ancora migliore
Pagina 4

XCollar, collari con supporto cervicale, la grande novità 2011
Pagina 2

XCollar, collari con supporto cervicale, la grande novità 2011
Pagina 2



La gestione di un paziente traumatizzato è un aspetto critico per molti soccorritori. Durante la fase di recupero gli equipaggi sono chiamati ad operare, spesso senza l'ausilio di medici e infermieri, in condizioni ambientali difficili e con il preciso compito di stabilizzare il paziente prima di eseguire il trasporto.

Per questo ai moderni dispositivi dell'emergenza traumatica si chiede che siano:

- **efficaci**, perchè devono prevenire il peggioramento delle condizioni del paziente, in particolare devono assicurare la stabilità del rachide cervicale e il corretto allineamento tronco/collo
- **semplici da utilizzare**, perchè non sempre è possibile fornire un addestramento specifico a tutti gli

equipaggi e tutti i soccorritori, inoltre occorre espletare le manovre di valutazione primaria e stabilizzazione il prima possibile e senza intoppi

- **ad alta visibilità** perchè ci si trova ad operare di notte, col brutto tempo, in locali angusti. È importante distinguere a colpo d'occhio i meccanismi e le componenti dei presidi, ma è anche importante rendere più visibile il paziente specie se si opera in strada o durante le maxi-emergenze.

SU QUESTO NUMERO:

Prevenire le lesioni spinali Nuovi collari Xcollar

Una grande novità per assicurare il miglior supporto alle vertebre cervicali in caso di sospetto trauma

2

Ergon, eccellenza aggiornata

Miglioramento continuo! Ecco le ultime novità del prodotto rivelazione del momento. Dai vostri suggerimenti l'eccellenza per il recupero

4

Speciale Torneo sanitario dei tre confini

- Associazioni
- Risultati
- Prossimi appuntamenti



Reportage dell'ultima edizione del torneo sanitario che ogni anno appassiona sempre più persone

6

Sedie portantine EXTRA, le sedie in lega leggera

Scendiscale o tradizionali

le sedie Extra sono il massimo della tecnologia a partire da soli 9,9 Kg

8

In questo numero vi presentiamo alcuni prodotti innovativi come i nuovi collari XCollar e la rivoluzionaria barella a geometria variabile Ergon che è stata oggetto di interessanti aggiornamenti che la rendono ancor più performante.

Visitateci a

R.E.A.S. 2011

Montichiari (BS)
7/8/9 Ottobre 2011

S.I.S.118

Torino
22-24 Settembre 2011

Vi aspettiamo ai grandi eventi del settore per presentarvi le ultime novità e permettervi di provare di persona attrezzature e dispositivi.



► **NOVITÀ ASSOLUTA**

COLLARI XCOLLAR

ELEVATO SUPPORTO SPINALE E FACILITÀ DI UTILIZZO

**Novità
esclusiva
Me.Ber.**

Un facile sistema di regolazione con i pratici cinturini Xtraps con codici colore per la massima praticità anche con illuminazione scarsa

**Compatibile
con esami RX/
CT/MRI,**
radiotrasparente,
senza lattice e non
assorbente.

Appendice ripiegabile per fornire il corretto supporto da sopra la C-1 a sotto la C-7

L'immobilizzazione cervicale ha una nuova frontiera con XCollar, i collari di ultima generazione, regolabili e con supporto per le vertebre cervicali

Xcollar è un sistema di immobilizzazione cervicale regolabile. È utilizzabile per pazienti da 12-14 Kg a 160 Kg grazie alla regolazione bilaterale, che rende anche possibile l'applicazione "asimmetrica" o nella "posizione di ritrovamento". L'immobilizzazione cervicale funziona assicurando il paziente in due punti, sopra la C-1 e sotto la C-7. Gli Xstraps di colore blu e giallo completano il sistema di immobilizzazione.

L'applicazione di **Xcollar** è rapida e efficace, suddivisa in tre fasi: Impostazione, Regolazione e Fissaggio.

Attraverso **Xcollar**, l'operatore può assicurare il rachide cervicale con una mano sola, evitandone la manipolazione e allo stesso tempo, utilizzando forze opposte per regolare il dispositivo a seconda della circonferenza e lunghezza del paziente con l'altra mano.

La versione **Xcollar Plus** è dotata di un cuscinetto morbido spesso 12mm composto da 4 sezioni pretagliate che possono essere divise e sovrapposte fino ad un totale di 5 cm. Il cuscinetto viene fornito con cin cinturini in velcro compatibili con qualsiasi dispositivo di trasporto evitando qualsiasi movimento verticale, laterale e rotativo.

Ottimo supporto fino alla C7
(settima vertebra cervicale)

Fissaggio di fortuna per la
stabilizzazione cervicale




I collari XCollar permettono di isolare la frattura assicurando il paziente sopra la vertebra C-1 e sotto la C-7 agendo su due punti posteriori e due punti anteriori senza applicare alcuna trazione non richiesta sulla colonna cervicale, evitando qualsiasi possibile distrazione. I collari sono dotati di cinturini per un fissaggio di fortuna del capo, insostituibili nella gestione di una maxiemergenza e nell'attesa di rinforzi e della disponibilità di strumenti più idonei.

Quattro semplici operazioni per
una perfetta immobilizzazione



1 Staccare i
cinturini Xtraps
Blu e Gialli

2 Allentare le
linguette dei
cinturini laterali

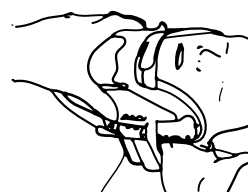

3 Inserire una
mano tra l'area
della colonna
vertebrale e l'XCollar
quanto necessario per
controllare il paziente

4 Rimozione:
Applicare pari
pressione
sull'XCollar quanto
necessario per controllare
il paziente ambo i lati
della fibbia per rimuoverla



Gamma prodotti



Article Code

794

"XCOLLAR ORANGE" COLLARE
CERVICALE REGOLABILE



Article Code

796

"NEXPLINT PLUS ORANGE" COLLARE
CERVICALE REGOLABILE CON FERMACAPO

A differenza degli altri modelli, è pieghevole, per uno stivaggio all'interno dello zaino più pratico. Durabilità del prodotto estesa per situazioni e condizioni ambientali estreme. Ottimo per estricazione da veicolo, medicina tattica, spazi limitati, a lato di superfici, montagna e soccorsi urbani.

Article Code

792

"XCOLLAR ORANGE" COLLARE
CERVICALE REGOLABILE CON
FERMACAPO



ERGON

LA PIÙ INNOVATIVA TRA LE BARELLE SI RINNOVA ANCORA

LE NOVITÀ



1

Nuove protezioni perimetrali


Sono state ricavate delle protezioni in lastica dura sugli angoli in modo da evitare il danneggiamento del materiale morbido ad alto comfort durante le operazioni di recupero e nello stoccaggio sull'ambulanza.



2

Nuove indicazioni ad alta visibilità

Tutte le indicazioni per i movimenti del gancio FlexiLock sono stati realizzati con un colore di contrasto in modo da renderle evidenti anche in condizioni di scarsa visibilità e illuminazione.

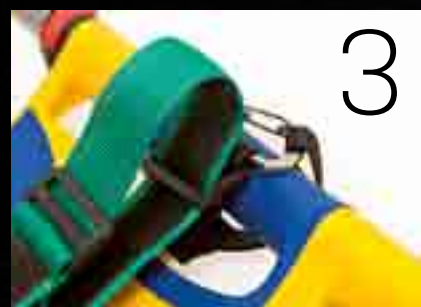

3

Nuova cintura ragno con codici colore


La nuova cintura ragno di Ergon è realizzata in colori ad alta visibilità per una corretta esecuzione della manovra di immobilizzazione del paziente.

LE CARATTERISTICHE UNICHE

Geometria variabile



flexilock

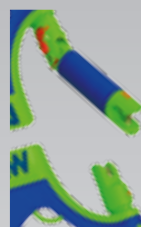

Grazie al gancio FlexiLock a geometria variabile Ergon permette recuperi in posizioni in cui le barelle a cucchiaio non possono arrivare

HC³ High Comfort Composite Cell



Ergon è realizzata con un particolare multi-polimero per offrire al tempo stesso aree ad alto comfort ed aree ad alto grip per una presa sicura.

È difficile migliorare il meglio, ma continuiamo a farlo per dare il massimo ai professionisti dell'emergenza.

Abbiamo deciso di trasformare Ergon in un progetto aperto, in continua evoluzione, perché riteniamo che sia dall'esperienza dei soccorritori che dipende il successo di un prodotto. Abbiamo quindi introdotto tre importanti suggerimenti che abbiamo ricevuto dai nostri utilizzatori e li abbiamo resi disponibili nella

nuova versione di Ergon. La barella diventa quindi più resistente grazie a nuove protezioni perimetrali, più visibile di notte, grazie alle indicazioni colorate in prossimità dei comandi e più funzionale con la nuova cintura ragno con codici colore per un facile coordinamento delle operazioni di recupero.

Oltre a queste caratteristiche innovative Ergon garantisce le sue doti uniche di flessibilità operativa e comfort che la rendono uno dei dispositivi per recupero atraumatico tecnologicamente più avanzati oggi disponibili sul mercato.

Ora è il momento di mandare in pensione le tecnologie antiche e passare al top dell'evoluzione nel campo del soccorso. Comunque la vostra vecchia barella a cucchiaino avrà ancora un po' di utilità. Sì, rottamandola per passare all'innovativa barella comfort a geometria variabile Ergon otterrete uno sconto. **Non esitate a contattarci per maggiori informazioni!**

▶ www.meber.it/ergon



▶ È IL UNA PRATICA NOVITA MOMENTO DI FARE ORDINE!

- ▶ Più ordine in
ambulanza
- ▶ Maggiore durata
del Velcro®
- ▶ Più rapidi negli
interventi



ART12024 CUSTODIA PER FERMACAPO E CINTURA RAGNO

Pratica custodia in cordura con maniglia per l'alloggiamento dei blocchetti del fermacapo della tavola spinale e il ragno. Consente di ottimizzare lo spazio all'interno dell'ambulanza evitando il deterioramento del velcro dei blocchetti e avendo sempre il kit immobilizzazione pronto all'uso.



* fermacapo e cinture ragno sono
vendute separatamente

► Grande successo per la 3^a edizione



TORNEO SANITARIO DEI TRE CONFINI

Anche quest'anno Me.Ber. è sponsor del torneo. Vittoria alla Croce Verde di Sestri Ponente che si aggiudica una sedia portantina di ultima generazione della gamma Extra. Commenti entusiastici e grande successo di pubblico per una manifestazione in costante crescita di pubblico, interesse e rilevanza sul territorio.

**Prossimo
appuntamento
giugno 2012**

Un realismo unico per mettere alla prova gli equipaggi con situazioni prossime alla realtà

Gli equipaggi in gara devono affrontare 6 scenari simulati che riproducono situazioni che si potrebbero presentare durante un turno di servizio in ambulanza. Ogni scenario prevede la presenza di uno o più feriti truccati abilmente dai truccatori del gruppo M.A.T.T.E. e di figuranti con la funzione di testimoni e/o disturbatori, oltre al personale dell'organizzazione (giudici, capi-prova, fotografi-operatori video, truccatori, addetti alla viabilità). Gli scenari sono suddivisi sul territorio dei Comuni di Borgotaro e Albareto; ulteriori difficoltà sono date dai luoghi impervi in cui viene svolto lo scenario, ed anche per questo su alcune prove sono presenti i Vigili

del Fuoco Volontari del distaccamento di Borgotaro e i Volontari del Soccorso Alpino che garantiscono la sicurezza durante le prove e collaborano con gli equipaggi come avviene sugli interventi reali. Non mancano gli spunti simpatici dovuti alla presenza di attori-disturbatori particolarmente abili nel distrarre i soccorritori in gara. Una formula ben riuscita che riscuote sempre un grande successo sia tra gli equipaggi in gara che tra il pubblico presente su ogni prova.

La preparazione degli scenari è una delle fasi più impegnative dell'organizzazione; vengono scelti i luoghi in cui svolgere le simulazioni, in base ai luoghi vengono preparate le bozze degli scenari che vengono provati sul posto ed eventualmente modificati e rivisti in base alle prove effettuate. Gli scenari in cui sono

coinvolti i Vigili del Fuoco ed il Soccorso Alpino sono quelli che richiedono di essere provati più volte in quanto sono quelli più impegnativi ma anche quelli più spettacolari. Una volta definiti gli scenari, vengono preparate le schede di valutazione specifiche per ogni scenario, una per il team-leader ed una per il resto dell'equipaggio; le schede contengono le valutazioni su tutte le azioni che devono compiere le squadre in gara per completare lo scenario. Ogni scenario ha un tempo massimo di esecuzione stabilito in base alle prove fatte in fase di preparazione, se una squadra in gara non completa lo scenario entro il tempo previsto, la prova viene interrotta e la squadra subisce una penalizzazione nel punteggio. Una volta completate le schede vengono preparate anche le istruzioni per i giudici in modo da avere i giudizi il più uniforme possibile.



Breve storia

Il Torneo Sanitario dei 3 Confini nasce nel 2009 come manifestazione in memoria di Matteo Caporali, giovane Milite dell'Assistenza Pubblica di Borgotaro-Albareto prematuramente scomparso, con l'obiettivo di aggregazione e formazione dei Volontari.

La manifestazione ha come evento principale la gara di soccorso tra gli equipaggi composti esclusivamente da Volontari, ma molto importante è anche l'esposizione sanitaria a cui sono invitate le aziende leader del settore; a conclusione della manifestazione, poi si sono svolti eventi quali simulazioni di maxi-emergenze, inaugurazione di struttura protetta mobile, mentre per l'edizione di quest'anno si è festeggiato il trentesimo anniversario di fondazione dell'Assistenza Pubblica di Borgotaro-Albareto.

All'edizione 2011 del Torneo hanno partecipato 22 equipaggi provenienti da 7 Regioni diverse.

A margine della Manifestazione viene anche organizzata una prova fuori concorso per permettere agli equipaggi interessati di provare a cimentarsi su uno scenario creato e preparato e valutato come uno scenario della gara principale; all'edizione di quest'anno si sono iscritti 7 equipaggi appartenenti ad Associazioni ANPAS e CRI.

Classifica Torneo 2011

Primi 6 equipaggi classificati

Classifica Prova Speciale 2011

(fuori concorso)

1	Croce Verde Sestri Ponente (GE)	1	Croce Verde Adria (BO)
2	Croce Bianca Alassio (SV)	1	C.R.I. Delegazione di Bedonia, Compiano, Tornolo (PR)
3	A.P. Val di Sambro (BO)	3	C.R.I. Comitato di Faenza (RA)
4	A.V.P.A. Croce Blu (MO)	4	A.P. Croce Verde Fornovese (PR)
5	Croce Verde Busalese (GE)	4	A.P. Langhirano (PR)
6	A.P. Pitelli (SP)	4	A.P. Parma (PR)
		4	A.P. Salsomaggiore Terme (PR)

Gruppo Truccatori M.A.T.T.E.

Sulla scia del successo della prima edizione, nel 2010 è nato il primo Gruppo Truccatori di Volontari appartenenti all'ANPAS della Regione Emilia Romagna che è stato chiamato M.A.T.T.E. (Militi Anpas Team Truccatori Emergenza). Il nome del gruppo volutamente richiama il nome di Matteo a cui è dedicata la manifestazione. Il Gruppo è formato inizialmente da Volontari dell'Assistenza Pubblica di Borgotaro-Albareto e di Parma, con l'obiettivo di allargare le adesioni a Volontari di altre Associazioni. I Volontari hanno frequentato un corso di formazione di due giorni nella primavera 2010 presso la Croce Bianca di Bergamo, ed hanno quindi iniziato a lavorare sugli scenari della Manifestazione già dall'edizione di quell'anno. Su ogni scenario è presente almeno un Truccatore che "prepara" abilmente le vittime prima di ogni prova. La preparazione e l'impegno profuso dai truccatori sono stati apprezzati da tutti i partecipanti alla Manifestazione, ed il successo è testimoniato anche dalle tante richieste ricevute da tanti Volontari per entrare a far parte del Gruppo. In seguito al successo ottenuto, i Truccatori del Gruppo sono stati impegnati anche in altri eventi come esercitazione di Protezione Civile in Provincia di Parma durante la quale sono stati formati nuovi truccatori, progetto sulla sicurezza stradale che ha visto coinvolte le scuole medie della provincia di Parma, esercitazione a margine dei festeggiamenti per l'anniversario di fondazione di un'Associazione aderente all'ANPAS della provincia di Modena.

Di seguito riportiamo alcuni messaggi ricevuti dai partecipanti nei giorni successivi alla manifestazione:

Stefano Torneo splendido, mitici molti equipaggi e ringrazio tutti per questi tre giorni spettacolari... grazie a tutti...

Ivan Ciao a tutti l'equipaggio di Capriolo ringrazia tutti per la splendida organizzazione

Maria Giulia Riassumere i tre giorni passati al Torneo Sanitario dei tre confini...è davvero difficile.....preparo un tema.....GRAZIE A TUTTI!!!!!! CONGRATULAZIONI DAVVERO!!!

Andrea Mamma mia questi truccatori!!!! Sono stati davvero bravi!!! Sembravano vere le ferite!!!

Daniele Come potrei dire... dirò quello che ho provato MERAVIGLIOSI...

Maria Giulia Ciao a tutti gli amici del TORNEO SANITARIO... mi mancherete un sacco.....!!!! Non immaginate quanto mi sia dispiaciuto dover decidere di saltare il Torneo Sanitario 2011!!! Se fossi più vicina a Borgotaro tornerei per essere lì anche quest'anno!!!

Susy Il bello del torneo è che crea nuove amicizie con interessi comuni e tanta tanta voglia di divertirsi!!



EXTRA & EXTRALITE

CONFORME ALLA
NORMATIVA
CONFORM TO
EN1865

LA NUOVA GAMMA DI
SEDIE PORTANTINE
AD ALTA TECNOLOGIA

EXTRA Article Code
670

Sedia portantina scendiscale assistita

Solo
14,9Kg

Solo
10,5Kg

EXTRASTART Article Code
672

Sedia portantina configurabile scendiscale assistita

Solo
9,9Kg

MODELLO
BASIC
Article Code
678

Solo
10,5Kg

Solo
11,5Kg

Article Code
676

MODELLO
STANDARD

Article Code MODELLO
674 ADVANCE

EXTRA
STAIR CHAIR

di serie
in ogni
modello

Article Code
582



Borsa con 3 cinture
a 2 pz. per sedia
scendiscale e sedia
portantine ExtraLite

Accessori sedie portantine

Article Code **612/AN**

Cintura toracica nera
(art. 612/N) o arancio/nera (art.
612/AN) con aggancio a 4 punti
per barelle autocaricanti e sedie



Article Code
960

"Extra fixing system" sistema di
fissaggio per gamma sedia EXTRA
CONFORME NORMA EN1789

Article Code

670-001

Fermacapo per sedia
scendiscale Extra



Article Code
12014

Asta portaflebo "nimble"
idoneo su tutti i prodotti
ad esclusione di EXTRA LITE
Basic

