

MEBER⁺

MAX

POWERLIFT



POWER. SIMPLY POWER.

Barella e sistema di caricamento automatico
ad azionamento idraulico

www.meber.it

POWERLIFT

PORTATA MASSIMA

353Kg**778**lbs

**PREMI UN PULSANTE: SOLLEVA.
PREMI: ABBASSA.
PREMI: CARICA. PREMI: SCARICA.**

Max PowerLift System è la nostra nuova soluzione motorizzata combinata: barella e sistema di carico. Max PowerLift è stata progettata per semplificare il soccorso e il trasporto del paziente. Semplicità d'uso e immediatezza sono i punti di forza di questo dispositivo: ogni operazione è caratterizzata dalla facilità di utilizzo, semplice quanto premere un pulsante, con l'aiuto di un display che fornisce tutte le informazioni utili al funzionamento del dispositivo.

NESSUNA FATICA!

Solleva sia il paziente che la barella premendo un solo pulsante! La fase di caricamento è semplice ed estremamente intuitiva: gestire i pazienti bariatrici diventa un gioco da ragazzi!!



8"

Soli 8 secondi per portare la barella alla massima altezza di carico!

Una barella motorizzata per fare la differenza in ogni intervento.

**LUCI A LED E GRAFICHE
RIFLETTENTI AD ALTA
VISIBILITÀ.**

Max PowerLift è dotata di 4 luci LED, per rendere sicuro ed agevole il soccorso di pazienti in condizioni di scarsa visibilità.



**TUTTE LE ALTEZZE A PORTATA DI MANO,
GRAZIE AD UN SOLO PULSANTE.
E TANTO, TANTO ALTRO.**

Max PowerLift è stata progettata per garantire operazioni di soccorso facili e sicure. Il sistema ad azionamento idraulico consente di sollevare e abbassare la barella, il tutto controllato da un circuito alimentato da una batteria ricaricabile. (La barella è compatibile con gli articoli 12090 e 12092)

FOWLER

Posizione Fowler
disponibile fino a 30°.

TELAIO TELESCOPICO

Il telaio telescopico, accorciabile
dal lato testa, permette
di manovrare la barella
agevolmente in spazi ristretti.

4 RUOTE PIVOTANTI

Il sistema di blocco/sblocco
delle 4 ruote pivotanti è posto
su ciascuna ruota, così come
il sistema di auto-centraggio
sulle ruote posteriori.

SISTEMA DI BACKUP

La barella può essere utilizzata in
tutta sicurezza anche a batteria
scarica ed in assenza di corrente.


MAX POWERLIFT SYSTEM.

STRAORDINARIAMENTE SEMPLICE. ADATTA AD OGNI EVENIENZA.

Facile. Incredibilmente facile... Ma come?

Max PowerLift racchiude tutta la tecnologia d'avanguardia sviluppata da Me.Ber., installata su un unico dispositivo. Per renderlo utile e fruibile, siamo ricorsi ad alcuni accorgimenti che ne hanno semplificato l'utilizzo. Semplicità significa meno ore di formazione, ottimizzando al contempo l'efficienza del dispositivo.

Max PowerLift adotta comandi molto intuitivi sui lati della barella e sul Power Load, con un'unica funzione per pulsante.

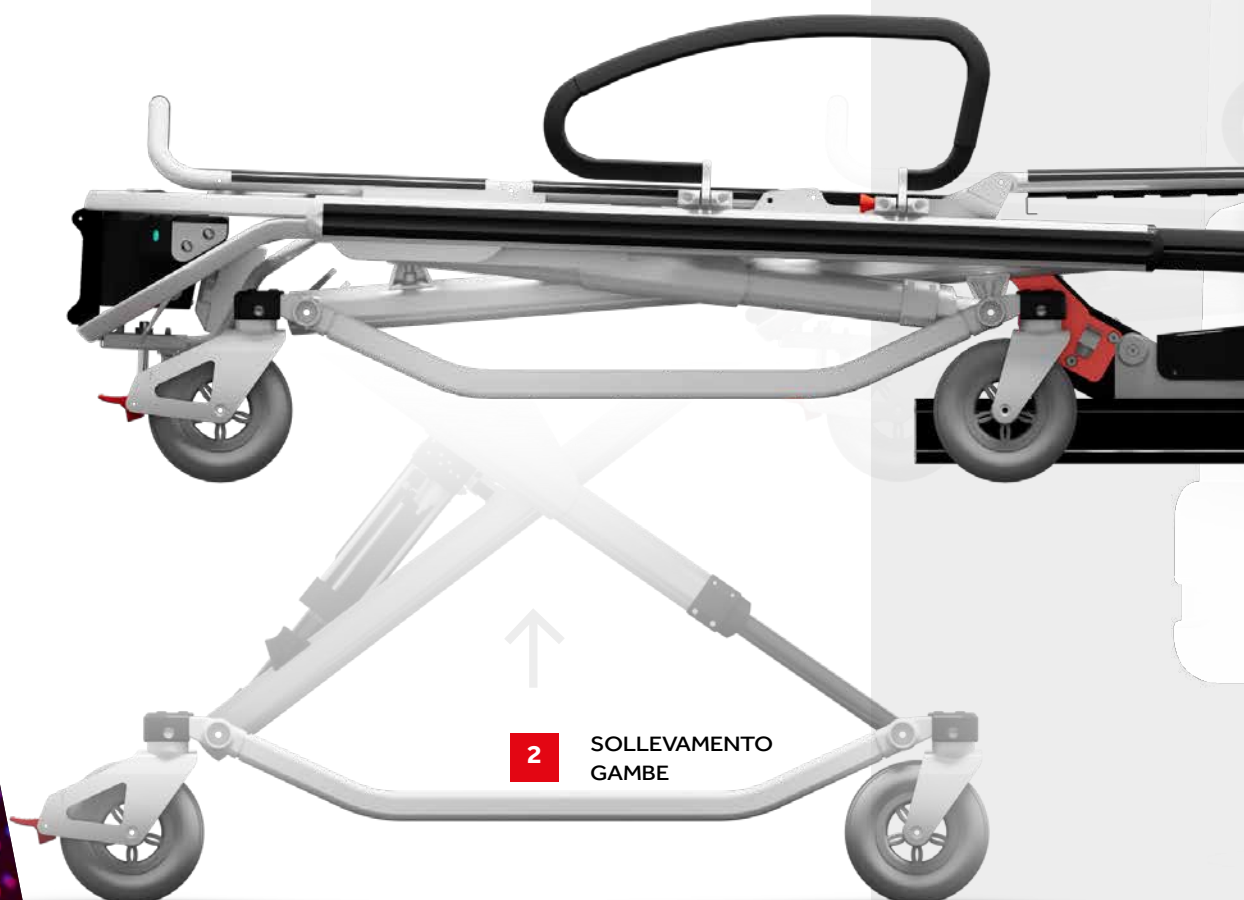

ALTEZZA DI CARICO VARIABILE

L'altezza di carico può essere personalizzata, in base al veicolo.

SEMPRE ALL'ALTEZZA CORRETTA

Puoi regolare l'altezza della Max PowerLift a piacimento, in qualunque momento. A seconda dello scenario di soccorso è possibile regolare l'altezza per consentire il soccorso a terra e successivamente sollevarlo fino all'altezza di carico corretta, passando attraverso innumerevoli posizioni intermedie.

3 CARICO

4 AGGANCIO

1 BLOCCAGGIO

Barella e sistema di caricamento automatico ad azionamento idraulico



Max Powerlift Barella e sistema di caricamento automatico ad azionamento idraulico		
	Barella X-frame	Sistema di caricamento
Peso	75 kg	116 kg
Dimensioni ad altezza massima e con sezione di testa estesa	2150x595 mm	2100x695x240 mm
Materiale	Alluminio	Alluminio / Acciaio
Alimentazione	Batteria ricaricabile 28V	Batteria ricaricabile mediante sistema alimentazione ambulanza
Massima altezza di carico	890 mm	
Schienale	schienale reclinabile da 0° a 85°	
Trendelenburg	0°÷15°	
Fowler	30°	
Capacità di carico	353 kg su tutte le altezze	
Da posizione abbassata ad altezza massima	8"	
Ruote	4 ruote pivotanti ø 200 con bloccaggio direzionale	

Tutti i diritti sono riservati a Me.Ber. s.r.l. Unipersonale. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Me.Ber. s.r.l. Unipersonale non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall'inesattezza delle informazioni riportate in questo documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

Accessori



Article Code
7002

MATERASSO 4 PZ
ELETTROSALDATO NERO



Article Code
12128

SISTEMA ALLUNGABILE
PER POGGIATESTA ART.
12100/N



Article Code
12100/N

CUSCINO
ELETTROSALDATO
SAGOMATO NERO



Article Code
12092

BATTERIA MILWAUKEE
M28C PER BATTERIA
RICARICABILE M28 RED



Article Code
12090

CARICABATTERIA MILWAUKEE
M28C PER BATTERIA
RICARICABILE M28 RED




Article Code
12120

PORTA OGGETTI NERO
PER CARRELLO INFERIORE
(DIMENSIONI: 92X43 CM)



Article Code
12122

PORTA OGGETTI NERO
PER CARRELLO DI CARICO
(DIMENSIONI: 39X52 CM)

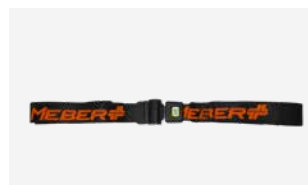

Article Code
Art. 608-N/MEB

CINTURA NERA 2 PEZZI CON
GANCIO IN METALLO (L. 155 CM).



Article Code
612/N-2/MEB

CINTURA TORACICA
REGOLABILE NERA O
ARANCIO/NERA

MEBER

Me.Ber. s.r.l. Unipersonale

Strada Langhirano, 270 43124 Fontanini (Parma) Italia

Tel. +39 0521 648770 | Fax +39 0521 648780 | e-mail: info@meber.it