


MEBERT[®]

www.merber.it Medical Journal

Maggio 2016 n° 28

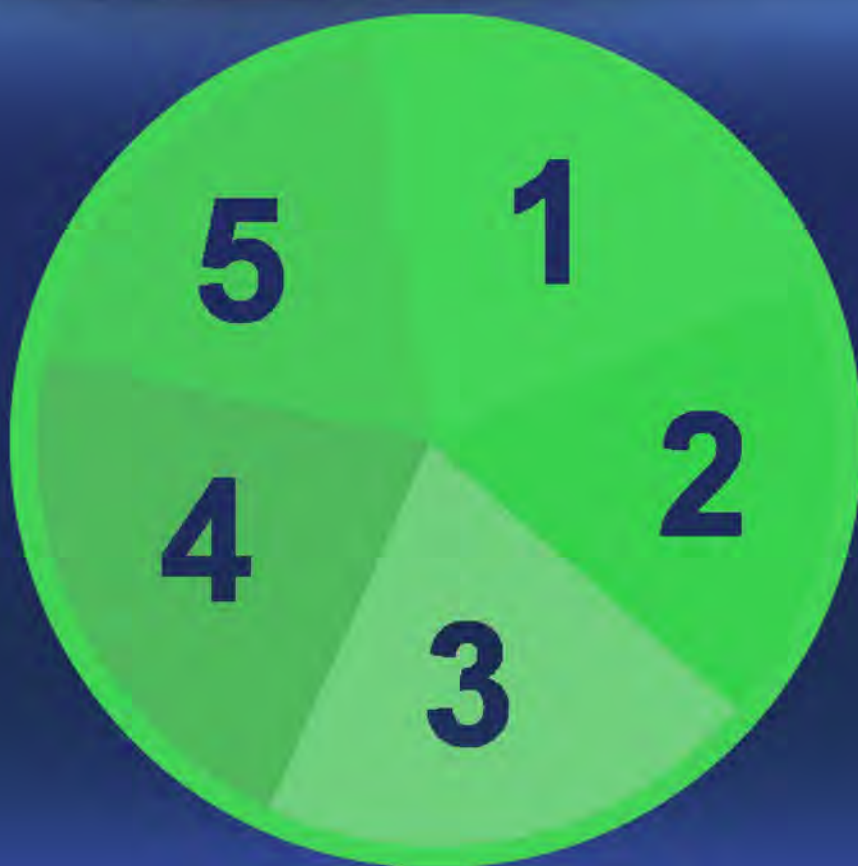

I 5 DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Tutti i prodotti MeBer si differenziano per le loro caratteristiche esclusive. Ogni specifica caratteristica è il frutto di un lungo percorso di ricerca e perfezionamento. In questo numero abbiamo elencato i 5 dettagli che fanno la differenza di alcuni dei principali prodotti della nostra gamma.

SU QUESTO NUMERO:

2 MERCURYLITE⁴

4 EXTRA Ergolift

6 ERGON



Scoprite tutte le innovazioni di Extra Ergolift a pagina 4

MERCURYLITE4

Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile con 4 ruote girevoli



Article Code

7080/4RG PROOF

Article Code

7082/4RG PROOF

Versione alta

**I 5 DETTAGLI CHE
FANNO LA
DIFFERENZA**

**Leggerezza e robustezza
senza eguali**

Peso 36,5 kg

Interamente realizzata in lega di alluminio, si differenzia dagli altri modelli della famiglia Mercury, costruiti in acciaio inox, per la sua leggerezza. I pianali in alluminio sono resistenti, durevoli e perfettamente sanificabili.



Leva di sblocco
ruote girevoli
anteriori

Ruote girevoli
anteriori

**4 ruote
girevoli per la
massima
manovrabilità**

"Mercury Lite" è disponibile nella versione a 4 ruote girevoli che conferisce alla barella estrema manovrabilità. Ideale per gli spazi stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale a ruote fisse.

MERCURYLITE4

MEBERT
Medical Journal

Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile con 4 ruote girevoli

**I 5 DETTAGLI CHE
FANNO LA
DIFFERENZA**

È dotata di sistema multilivello mediante 2 pistoni a scorrimento meccanico su ogni asse.

Posizione intermedia



**Sistema
multilivello per
la massima
versatilità**

**Sistema di fissaggio
certificato per una
sicurezza garantita**



Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, avviene tramite il sistema di bloccaggio certificato UNI EN 1789 Art. 955 Proof.

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.



Versione alta 7082/4RG PROOF

Mantiene tutte le caratteristiche del modello 7080 Proof, permette il caricamento su ambulanze con altezza di carico fino a 75 cm.

**Disponibile nella
versione più alta per
tutte le esigenze**

EXTRA Ergolift

Sedia sali/scendiscale motorizzata

 www.meber.it



Article Code

671

**Sedia sali/scendiscale
motorizzata**

**I 5 DETTAGLI CHE
FANNO LA DIFFERENZA**



**Portata
maggiorata**

200 kg - 230 kg

Extra Ergolift è in grado di trasportare in sicurezza pazienti bariatrici fino ad un peso di 200 kg nel trasporto motorizzato e 230 kg in configurazione manuale, sia in salita sia in discesa.

**Cingoli
maggiorati**

Cingoli

lungi ad alta aderenza

I pattini di Extra Ergolift hanno una lunghezza maggiorata che consente l'appoggio costante su tre gradini per una maggiore stabilità ed un elevato comfort.

EXTRA Ergolift

Sedia sali/scendiscale motorizzata

MEBER+
Medical Journal

I 5 DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Massima sicurezza

Brake off

Extra Ergolift è dotata di un sistema di emergenza per consentire la discesa in totale sicurezza anche in caso di scaricamento improvviso della batteria durante il servizio.

Massimo impiego

Isolamento IP65

Ideata con protezione IP 65 contro acqua e polvere, Extra Ergolift può essere impiegata anche in caso di pioggia e condizioni climatiche avverse.

Massima efficienza

Elevata autonomia

Extra Ergolift è dotata di potenti batterie al litio che consentono, con un'unica carica, la percorrenza di 18 rampe di scale da 20 gradini l'una con un carico trasportato di 130 kg.



ERGON

Barella comfort a geometria variabile

I 5 DETTAGLI CHE
FANNO LA DIFFERENZA



Article Code

16150/V

Article Code

16150/G



**Geometria
variabile**



ERGON permette di effettuare con facilità recuperi in ambienti difficili anche con il paziente in condizioni critiche.

flexilock



Nuovo sistema di chiusura snodato Flexilock che permette sia di separare la barella in due metà che di eseguire recuperi in posizioni e in situazioni estreme.



#HC³ High Comfort Composite Cell

ERGON garantisce il massimo comfort, in particolare nei punti di maggior decubito del paziente, grazie all'impiego di uno speciale materiale: l'esclusivo MeBer HC³ (High Comfort Composite Cell) composto da un **materiale morbido costampato su un polimero plastico ad alta resistenza**.

L'impiego del materiale HC³, oltre a garantire una totale stabilità strutturale, permette un elevato isolamento termico.

Distanza tra le semibarelle ridotta

La distanza tra le due semibarelle è di appena 25 mm; ciò consente un **eccellente supporto alla colonna vertebrale** rispetto alle normali barelle a cucchiaio che sono separate da circa 80mm. La forma della **lama** è quindi **più larga** ed è stata progettata per inserirsi con facilità e gradualità tra il paziente e il suolo.

UNI EN 1865 UNI EN 1789

Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei
UNI EN 1865 - UNI EN 1789



Art. 959
Sistema di fissaggio a parete



www.meber.it Medical Journal

Per scoprire i prodotti MeBer e osservare in azione le loro caratteristiche distintive visita la nuova sezione video MeBer Academy del sito o il nostro canale YouTube!



MeBer ha creato la MeBer Academy una collana di video dimostrativi sul funzionamento dei prodotti MeBer e sulle loro principali caratteristiche.

In pochi minuti potrete osservare la messa in opera dei dispositivi e le manovre necessarie per utilizzarne le principali funzionalità.

Tutte le informazioni che desiderate con un semplice click e ovunque voi siate!

RETTmobil 2016



16. Europäische Leitmesse für Rettung und Mobilität
16. European Leading Exhibition for Rescue and Mobility
Fulda | Messe Galerie | 11.-13. Mai 2016 | Mittwoch-Freitag 9-17 Uhr
Fulda | Messe Galerie | May 11-13, 2016 | Wednesday-Friday 9am-5pm



Si è conclusa l'edizione 2016 di RETTmobil, la fiera del soccorso e della mobilità che si tiene ogni anno a Fulda.

Come ogni anno MeBer era presente con il proprio stand dove ha esposto le principali novità del 2016. All'interno dello stand un'intera area è stata adibita ad AREA DEMO per mostrare il funzionamento della nuova sedia sali/scendi scale motorizzata EXTRA Ergolift.

I responsabili commerciali MeBer sono stati lieti di accogliere numerosi visitatori e clienti internazionali che hanno potuto visionare, oltre alle novità 2016, anche gli altri prodotti di produzione MeBer studiati per i mercati internazionali.

