



7082/4RG Proof Mercury Lite

Barella autocaricante in alluminio ad altezza variabile certificata con 4 ruote girevoli versione alta



CARATTERISTICHE

[Visita il sito Mercury](#)

“Mercury Lite” è disponibile nella versione a 4 ruote girevoli che conferisce alla barella estrema manovrabilità. Ideale per gli spazi stretti ed angusti. Con l'azionamento di un semplice meccanismo si sbloccano le ruote anteriori o si riportano nella configurazione originale a ruote fisse. Il fissaggio della barella, a bordo del mezzo di soccorso, avviene tramite il sistema di bloccaggio certificato UNI EN 1789 Art. 955 Proof (vedi “[Sistemi di fissaggio](#)”). Viene fornita completa di materasso e cinture.

Questa versione, pur garantendo tutte le caratteristiche del modello 7080/4RG Proof, permette in più il caricamento su ambulanze con altezza di carico maggiorata.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

*le immagini sono a solo scopo illustrativo.

DATI TECNICI

Certificazione 10G	
Materiale	Alluminio verniciato
Multilivello	
Piano	Con Trendelenburg
Altezza intermedia (cm)	75
Altezza max (cm)	99
Altezza massima di carico (cm)	71
Altezza minima di carico (cm)	69
Altezza piegata (cm)	31
Larghezza (cm)	57
Lunghezza (cm)	197
Lungh. con carrello abbassato (cm)	165
Peso (kg)	40,5
Portata (kg)	250

IMMAGINI



VEDI ANCHE



Mercury Lite 7080/4RG Proof
Barella autocaricante in alluminio
ad altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli



Mercury 7070/4RG PROOF
Barella autocaricante inox ad
altezza variabile certificata con 4
ruote girevoli



Mercury EL 7092 PROOF
Barella autocaricante certificata



Mercury EL 7094 PROOF
Barella autocaricante certificata
versione alta

ACCESSORI



12072/BG

"COVER OX 5 BG"- Portabombola professionale per bombole da lt 5



12106

AIR-COM Materasso antidecubito per barelle a segmenti alterni



707

Telo di trasferimento salvamaterasso a 6 maniglie



938

Portabombola Oximeb



12054

Portabombola Oximeb Maxi - Portabombola per bombola da 3 litri



12084-001

Custodia per ali bariatriche



12170

Materasso di colore nero per ala bariatrica dx per barelle autocaricanti



12172

Materasso di colore nero per ala bariatrica sx per barelle autocaricanti



7013/A

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



7014/A

Materasso 4 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



12100/N

Cuscino elettrosaldato sagomato nero con logo MeBer per materasso elettrosaldato



955 PROOF

Sistema di fissaggio EN 1789 per barelle autocaricanti Proof



608/A-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



608/N-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



612/AN-2/MEB

Cintura toracica regolabile arancio/nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



12025

Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



12080

"MBP" pianale bariatrico largo per barelle autocaricanti FROG MERCURY e GECKO completo di cinture con arrotolatore e fissaggi barella



12080-001

Kit montaggio piano bariatrico per barelle autocaricanti



12154

Sistema di contenimento Bear Pods per obesi per barelle autocaricanti



12018N

Asta portaflebo telescopica per barelle autocaricanti



939

Piano portastrumenti per barelle



12128

Sistema allungabile per poggiatesta barella MeberX e Mercury



12070/BG

"COVER OX 2-3 BG"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3




12070/BR

"COVER OX 2-3 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 2 e 3



12072/BR

"COVER OX 5 BR"- Portabombola professionale per bombole da lt 5

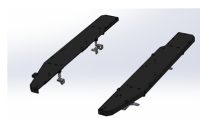

12200

Set ali bariatriche dx e sx per barelle autocaricanti Mercury completo di materassi, cinture con arrotolatore e kit fissaggio alla barella

ACCESSORI DI SERIE



12025

Tasca portaoggetti multiuso nera per barelle autocaricanti



7013/N

Materasso 3 pz. in Skay ignifugo elettrosaldato



612/N-2/MEB

Cintura toracica regolabile nera con aggancio a 4 punti e nastro MeBer per barelle autocaricanti e sedie



608/N-MEB

Cintura 2 pz. con gancio in metallo e nastro MeBer nero (L. 155 cm)