



7097/4RG PROOF Mercury Lite Cinque 7097/4RG Proof

Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli versione alta - certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



CARATTERISTICHE

Versione alta della barella Mercury Lite Cinque. Derivate da uno dei progetti di maggiore successo nell'ambito del soccorso, sicuramente il prodotto Me.Ber. più apprezzato: la Mercury 4RG. Mercury Cinque ha lo scopo di estendere ulteriormente le capacità operative del modello originale grazie all'introduzione delle cinque altezze. Mercury Cinque però è molto di più di un'evoluzione! È l'unica barella a cinque altezze con carrello anteriore abbattibile!

La molla a gas assicura che le gambe anteriori si aprano in ogni situazione, con e senza il paziente caricato.

5 POSIZIONI:

1. LIVELLO DI CARICO - Massima altezza

Caricamento sul mezzo, movimentazione a terra, trasferimento finale in Pronto Soccorso o sala operatoria, trattamento o triage sul campo.

2. POSIZIONE ALTA - Recupero alto

Adatta come posizione di riposo. Altezza ideale per la collocazione del paziente spinalizzato.

3. INTERMEDIA - Letto alto

Altezza tipica di un letto di uso ospedaliero o altezza idonea a far sedere il paziente deambulante. Altezza ideale per la traslazione da barella a sedia e viceversa.

4. POSIZIONE BASSA - Letto o divano di casa

Altezza tipica di un divano o di un letto di un'abitazione. Questa altezza permette una facile traslazione del paziente collaborante e semplifica il passaggio via barella.

5. POSIZIONE BASE - Recupero a terra

A soli 30cm dal terreno permette tutte le operazioni di carico convenzionali garantendo portata di 250 kg.

Altezze: 101 - 90 - 81 - 68 - 37 cm

Leggera grazie alle leghe in alluminio

Ergonomia contro il mal di schiena: i comandi della barella e l'ergonomia generale sono studiati per non sovraccaricare il soccorritore, soprattutto per alleviare il carico sulla schiena.

Ruote da 200 mm: maggior confort per il paziente e grande sicurezza per i soccorritori che possono muoversi con facilità anche in presenza di terreni e superfici con asperità.

4 ruote girevoli per manovrare sempre in sicurezza: Mercury Cinque ha 4 ruote girevoli. Un semplice comando permette lo sblocco della rotazione delle ruote anteriori per la massima manovrabilità.

Decorazioni catarifrangenti: per migliorare la visibilità della barella nel contesto del soccorso stradale notturno sono stati impiegati adesivi catarifrangenti in vari punti.

Compatibile con il sistema di fissaggio art. 955 Proof.



Dispositivo certificato secondo gli standard armonizzati di sicurezza europei UNI EN 1865 - UNI EN 1789.

DATI TECNICI

Certificazione 10G	
Materiale	Alluminio verniciato
Lunghezza (cm)	197
Lungh. con carrello abbassato (cm)	167
Larghezza (cm)	57
Altezza max (cm)	101
Altezza min (cm)	37
Altezza piegata (cm)	31
Altezza massima di carico (cm)	71
Altezza minima di carico (cm)	69
Peso (kg)	40
Portata (kg)	250

IMMAGINI



VEDI ANCHE



Mercury Lite Cinque 7095/4RG Proof

Mercury Lite Cinque, barella autocaricante in alluminio a 5 posizioni con 4 ruote girevoli certificata EN 1865 e completa di materasso e cinture



Mercury Cinque 7075/4RG PROOF

Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli



Mercury Cinque 7077/4RG PROOF

Barella autocaricante inox a 5 posizioni certificata EN1865 con 4 ruote girevoli- versione alta

ACCESSORI





7014/A
Materasso 4 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato



938
Portabombola Oximeb



707
Telo di trasferimento
salvamaterasso a 6 maniglie



608/A-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer arancio (L. 155 cm)



608/N-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer nero (L. 155 cm)




612/AN-2/MEB
Cintura toracica regolabile
arancio/nera con aggancio a 4
punti e nastro MeBer per barelle
autocaricanti e sedie



612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera con
aggancio a 4 punti e nastro MeBer
per barelle autocaricanti e sedie



12025
Tasca portaoggetti multiuso nera
per barelle autocaricanti

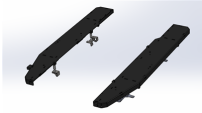

12200
Set ali bariatriche dx e sx per barelle
autocaricanti Mercury completo di
materassi, cinture con arrotolatore
e kit fissaggio alla barella

ACCESSORI DI SERIE



12025
Tasca portaoggetti multiuso nera
per barelle autocaricanti



608/N-MEB
Cintura 2 pz. con gancio in metallo
e nastro MeBer nero (L. 155 cm)



612/N-2/MEB
Cintura toracica regolabile nera con
aggancio a 4 punti e nastro MeBer
per barelle autocaricanti e sedie



7013/N
Materasso 3 pz. in Skay ignifugo
elettrosaldato